



#### 主要諸元

型式	BT43B/BT43W	ВТ7Ү
T A I S ¬ F	00228-000027	00228-000028
型式認定番号	交K21-11	交K21-10
機 械 の 種 類	ハンドル形電動車椅子(タイプI)	
全 長 × 全 幅 × 全 高 (mm)	1,195×650×1,100	1,190×560×1,080
機体重量(バッテリー除く)(kg)	98(70)	90(71)
操 舵 方 式	ループハンドルによる前輪操舵	
制 御 方 式	アクセルレバーによる無段階速度制御(マイコン)	
バッテリー(5時間率)	シールド12V 32AH×2個	シールド12V 25.5AH×2個
モーター(30分定格出力)	24V×390W×1個	24V×270W×1個
車輪	ノーパンクタイヤ:	ノーパンクタイヤ:
	前輪3.00-4、後輪:3.50-5	前輪3.00-4、後輪:3.00-4
充 電 器	自動充電器内蔵(温度補正付)	
	425(シート幅)×395(シート奥行)	425(シート幅)×350(シート奥行)
シートの 寸 法 (mm)・構 造	×480(バックサポート高)・	×360(バックサポート高)
	前後位置調整式(5cm)	前後位置調整式(5cm)
速 度 前 進	0.5~6.0無段階	
(Km/h) 後 進	0.5~2.0無段階	
実 用 登 坂 角 度 (゜)	10	
段 差 乗 越 高 さ (mm)	80以下	
溝 乗 り 越 え 幅 (mm)	120以下	
最小回転半径(mm)	1,460(機体最外側)	1,290(機体最外側)
連 続 走 行 距 離 (km)	約30(最高速度、平坦路、新品バッテリー)	約24(最高速度、平坦路、新品バッテリー)
使用者最大体重(kg)	100(積載物含む)	75(積載物含む)

<sup>※</sup>JIS T 9208認証を取得しています。

#### 走行上の注意

- 1. マイピアの操作に慣れるまで、広い安全な場所で十分練習 してください。
- 2. この製品は電動車いすです。それ以外の用途には使用しな いでください。
- 3. 走行中は携帯電話やトランシーバーを絶対に使用しないで ください。使用する場合はキースイッチを切ってください。 また、高圧線やテレビ塔など、強い電波が出ている所での 走行は避けてください。
- 4. 次のような場所や状況下での走行は、回避するか、介助者に 同行してもらってください。〔•交通量の多い道路•道幅の広い 横断歩道●踏切●砂利道●狭い道●防止柵の無い側溝や路肩付 近●夜間走行●雨降り●ぬかるみ●雪道●凍結路●濃霧●強風時〕
- 5. 段差および溝乗り越え時には十分ご注意ください。
- 6. 10°以上の急坂走行や5°以上の斜面での斜め走行、急旋回、 急発進、急停止、蛇行運転は、転倒する恐れがあります。避け
- 7. 使用者最大体重制限は、人、手荷物を含めて「BT43」は100kg、 「BT7」は75kgです。オーバーして使用しないでください。

マイピア試乗のご希望の方は、下記取扱店までご連絡ください。 製品についてのご相談・ご意見は下記までご連絡ください。

取 扱 店

販 売 店





## マイピアサービス保険

●電動車いすBT43・BT7には、1年間無料のサービス保険が つきます。ご購入時にご確認ください。 (「マイピアサービス保険」は、取扱説明書と同梱の加入ハガキをご投函された 方のみ有効です。)

●「マイピアサービス保険」とは別に、更に保障内容を充実した 「マイピア保険」をご用意しております。(有料)

(詳しくは、取扱説明書と同梱の"マイピア保険のご案内"をご覧ください。) ※「マイピアサービス保険」「マイピア保険」は、リースまたはレンタルでご使用の方は 加入できません。マイピアを個人購入された方のみ、この保険に加入できます。

※本機を安全に使っていただくために、本機には ⚠ 危険 ⚠ 警告 ⚠ 注意 の 安全表示ラベルを貼付しています。必ず守ってください。 ※本機のお取り扱いは「取扱説明書」を熟読のうえご使用ください。 ※本機のご使用前には必ず点検を実施し、安全を確認してください。 ※このカタログの仕様は改良などにより予告なく変更することがあります。 ※希望小売価格については、北海道・沖縄・離島を除く、適用価格です。

# 豊かさを創造し、未来へ挑戦する



〒791-8524 愛媛県松山市衣山1-2-5 TEL(089)924-7161(代) FAX(089)925-0771 TEL(089)924-7162(営業本部直通) ホームページ http://www.atexnet.co.jp E-mail:atexhome@atexnet.co.jp

□ 東北営業所 〒025-0301 岩手県花巻市北湯口第2地割1-14 (花巻第二工業団地センコン物流(株)花巻営業所敷地内) TEL(0198)29-6322(代) FAX(0198)29-6323

〒306-0313 茨城県猿島郡五霞町元栗橋6633 □関東支店 TEL(0280)84-4231(代) FAX(0280)84-4233

□中部営業所

〒791-8524 愛媛県松山市衣山1-2-5 □中四国支店

〒869-1102 熊本県菊池郡菊陽町大字原水1156-17 □九州営業所

〒799-2655 愛媛県松山市馬木町899-6 TEL(089)979-5910(代) FAX(089)979-5950 □ 部品センター

2023年改訂版





MyPia



〒503-0931 岐阜県大垣市本今5-128 TEL(0584)89-8141(代) FAX(0584)89-8155

TEL(089)924-7162(代) FAX(089)925-0771

TEL(096)292-3076(代) FAX(096)292-3423

●アテックスのホームページをご覧ください。http://www.atexnet.co.jp/

20210-221240

<sup>※</sup>連続走行距離は、平坦路を新品バッテリー満充電状態にて使用者最大体重で走行したとき、 バッテリーが100%放電するまでの距離を示します。

<sup>※</sup>マイピアは、国家公安委員会の型式認定を取得しています。



# 日本のあちらこちらで 活躍しているマイピア







そんなマイピアですが どんな特徴があるのでしょう?



## 運転免許証は必要なのかな~?



道路のどこを走ればいいの?







## パンクしたらどうしよう・・・

タイヤを採用しています。

※ノーパンクタイヤはBT43・BT7に標準装備



BT43なら約30km走れます。

※BT7は約24km

コンパクトで

使い易い!




ブルーと白の2色 から選べます





- ●安心と安全の充実機能!
- ●毎日の移動手段に使いたい!
- ●長距離\*1のお出掛けを楽しみたい!
- ●自宅周辺は坂道が多くて大変!
- ●たくさんのお買い物も安心!
- ※1 1回の充電で約30km走行できます。

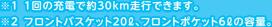







- ●マンション等にお住まいの方に!
- ●市街地等によく出掛ける方に!
- ●手軽にスマートに使いたい!\*3
- ちょっとしたお買い物に!
- **※3 BT7の全幅は560mm。**

安定感があるから 安心して走れます。 マンションの通路や 天気がいいから エレベーターにも ちょっと近くに 入れます。 スーパーの お出かけ。 駐輪場などにも ラクラク駐車

# B 743 安全性・機能性が向上! 会裕のある運転性能とソフトな乗り心地は、毎日の足として大活躍!

## コーナー減速機能

コーナーを曲がる時、自動的 に減速し、安全に曲がりきる ことができます。

## (四輪サスペンション)

走行中の振動・衝撃をしなや かに吸収。凸凹道もよりソフ トな乗り心地。

## 盗難抑止機能

駐車中、ハンドルを無理に 動かすと、警報が鳴るように 設定ができます。

## フロント大型バスケット

日常のお買物に便利な大型 バスケットを装備!(200)

## 超低速モード

0.5km/hの超低速走行で 狭い道や車庫入れも安心!

## ブラシレスモーター

ブラシ交換不要のノーメンテ ナンスモーター。

## LEDヘッドライト

大型で長寿命、 昼間点灯機能付。



## LEDリヤランプ

点滅式で視認性 抜群!



## 事故の危険を事前にお知らせ!



警告音と音声で危険 を知らせます。



簡単操作で安全! 手押しスイッチを 押している間、車 体を手押し移動で きます。





お出かけに便 利なフロント ポケット(容量 60)&お買い 物フック。













## 腰をかがめず楽々充電!

ハンドル下に充電用プラグを内蔵。家庭 用100Vコンセントにプラグを差し込む だけ。充電が終わると自動停止します。



## アクセルレバー& アクセルガード

意図せずアクセルレバー に触れてしまった時の誤 発進を防ぎます。



## 広幅タイヤ新装備

接地幅が当社従来比20mm アップ。(前輪のみ)



緊急コールボタン

長押しすると「助けてくだ さい!!と音声が流れ、周囲 に知らせます。

## もっと使いやすく、もっと安全にご利用いただくために。



車体カバー TAISI-F 00228-000012 希望小売価格 8.000円



リアバッグSET TAIS⊐-F 00228-000015 希望小売価格 9.000円



杖立て(S)SET TAIS== 00228-000017 希望小売価格 5,000円





TAIS⊐─₭ 00020-000041 TAIS⊐─₭ 00228-000019 希望小売価格 11.000円 希望小売価格 25,000円

スリムなボディに豊富な機能を凝縮! スマートなデザイン!

コンパクトで使いやすい性能は、市街地の足として最適!

## コーナー減速機能

コーナーを曲がる時、自動的 に減速し、安全に曲がりきる ことができます。

## フロント大型バスケット

日常のお買物に便利な大型 バスケットを装備!(160)

#### 盗難扣止機能

駐車中、ハンドルを無理に 動かすと、警報が鳴るように 設定ができます。

## ヘッドライト

昼間点灯機能付。



## 超低速モード

0.5km/hの超低速走行で 狭い道や車庫入れも安心!

## LEDリヤランプ

点滅式で視認性



## 【四輪サスペンション】

走行中の振動・衝撃をしなや かに吸収。凸凹道もよりソフ トな乗り心地。

## 生活スペースで活躍

エレベーターや玄関口の 出し入れ、スーパーなど の買い物にも便利です。

#### BT7の大きさ

- ■全長 1,190mm
- ■全幅 560mm

## 取り回しもラクラク



## コンパクトで扱いやすい設計

BT43との 最小回転半径の差…170mm BT43との全幅の差… 90mm

(機体最外側)

BT7 1,290mm BT43 1,460mm





高機能表示パネル

時計、バッテリー残量表示。

前進/後退 切替スイッチ



# シンプルで分かりやすい操作部

お助けずイス機能



音声案内ボタン

ホーンボタン

ウインカーボタン アクセルレバー とっさの時、レバーを強く握り込むと 音声案内「入」「切」切替 自動停止。 脚り込み アクセルレバーを強・握ると 保止 緊急停止します。 昼間点灯ボタン アクセルガード

運転者が乗り降りをする際、手足がアクセルレバーに

触れてしまい、誤発進することを防止。



## 腰をかがめず楽々充電!

ハンドル下に充電用プラグを内蔵。家庭 用100Vコンセントにプラグを差し込む だけ。充電が終わると自動停止します。



## アクセルレバー& アクセルガード

意図せずアクセルレバー に触れてしまった時の誤 発進を防ぎます。



## 広幅タイヤ新装備

接地幅が当社従来比20mm アップ。(前後輪)



手押しスイッチ

簡単操作で安全! 手押し スイッチを押している間、 車体を手押し移動できます。

## OPTION もっと使いやすく、もっと安全にご利用いただくために。



車体カバー TAIS== 00228-000012 希望小売価格 8.000円



希望小売価格 1.500円

バックミラー(107)SET 杖立て(S)SET TAIS⊐-№ 00228-000021



TAIS = 8 00228-000017 希望小売価格 5,000円



キースイッチ